




QuikRead go wrCRP+Hb

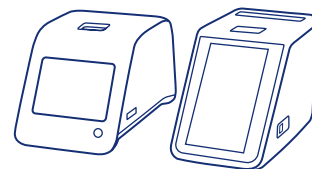


För QuikRead go Instrument och QuikRead go Plus Instrument

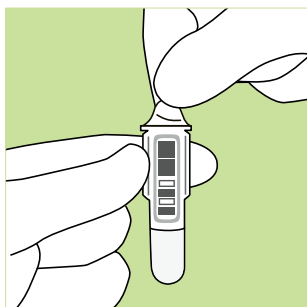


1 Ta bort folieskyddet från kyvetten. Vidrör ej den blanka nedre delen av kyvetten.

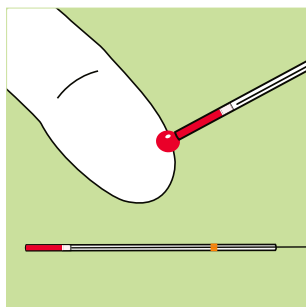


2 Fyll kapillärroret (10 µl) till den vita avgränsningen. Säkerställ att det inte finns luftbubblor i kapillärroret. Torka bort provrester från kapillärrorets utsida.

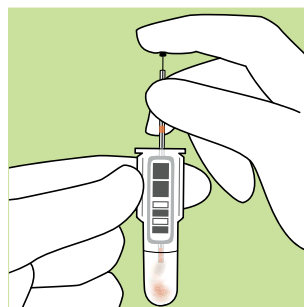


3 Sätt provet (10 µl) till buffertlösningen i kyvetten genom att trycka ner pistongen. Se till att kapillärroret blir helt tomt.

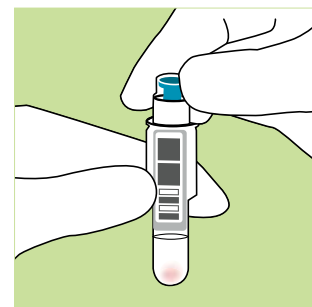


4 Sätt på den turkosa reagenskorken ordentligt. Tryck inte ned den inre, färgade delen av reagenskorken. Utför testet inom 2 timmar.

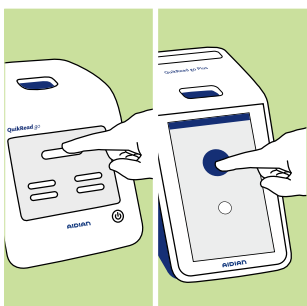

5 Välj Analysera / Analysera provet på skärmen på QuikRead go-instrumentet.

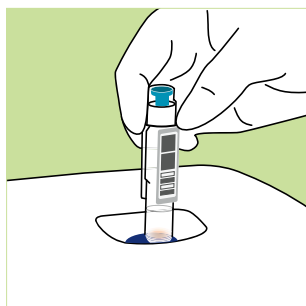

6 Sätt kyvetten i instrumentets mätbrunn. Streckkoden ska vara vänd emot dig.

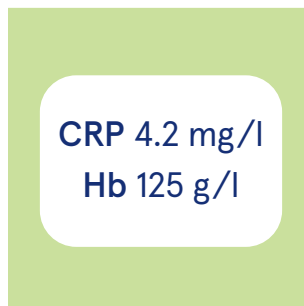


7 Analystiden är 2 minuter. Resultatet visas på skärmen och kyvetten kommer automatiskt upp ur mätbrunnen.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagan i förpackningen.

CRP 4.2 mg/l
Hb 125 g/l

QuikRead go wrCRP+Hb

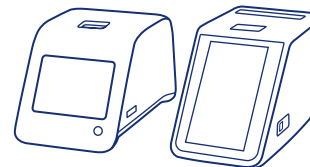

Reagenskit

Oöppnat kit i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum på kitet



Reagens-
korkar

Oöppnat rör i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum på förpackningen
Öppnat rör i 2–25°C: hållbart i 6 månader



Oöppnade
kyvetter

Förvaring i oöppnad innerförpackning i 2–25°C: till utgångsdatum
Förvaring utan innerförpackning:
2–8°C: hållbara i 6 månader / 18–25°C: hållbara i 3 månader



Öppnad
kyvett

Låt bufferten bli rumstempererad innan testet utförs
Utför testet inom 2 timmar efter att kyvetten öppnats
Provet är stabilt i bufferten i 2 timmar



CRP kontroller

Oöppnad flaska i 2–8°C: hållbar till utgångsdatum
Öppnad flaska i 2–8°C: hållbar upp till 2 månader



Hb-kontroll

Förvaring av oöppnad flaska i 2–8°C: till utgångsdatum
Förvaring av öppnad flaska i 2–8°C: 1 månad

Kontakt och beställning

Aidian Sweden AB

info@aidian.se / +46 8 623 04 00

order@aidian.se

quikread.com

Produkt	Art. nr.
QuikRead go wrCRP+Hb med kapillärrör (10 µl) och pistonger	146255
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Hb 10 µl Control	153656
QuikRead go 10 µl kapillärrör	147851
QuikRead pistonger	67966
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375