




QuikRead go easy CRP

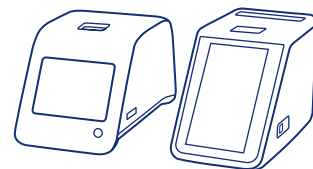


För QuikRead go Instrument och QuikRead go Plus Instrument

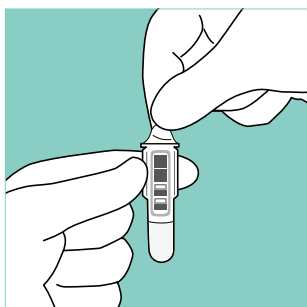


1 Ta bort folieskyddet från kyvetten. Vidrör ej den blanka nedre delen av kyvetten.

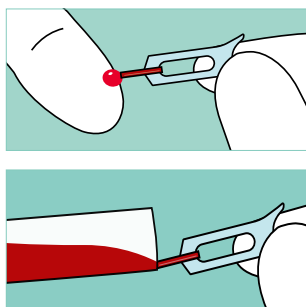


2 Håll QuikRead go provinsamlare nästan i ett horisontalt läge under ytan av bloddroppen och fyll kapillärdelen av provinsamlaren helt.

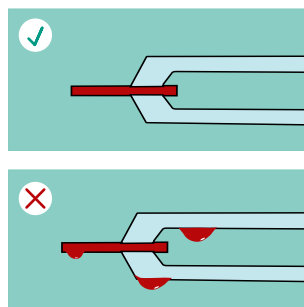


OBS! Kontrollera att kapillärdelen är helt fylld. Torka inte av provinsamlaren! Om det finns överskott av prov (se bild) på provinsamlaren, kasta bort den och ta en ny.

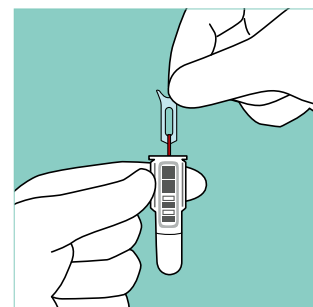


3 Sätt ner provinsamlaren i kyvetten inom 2 minuter.

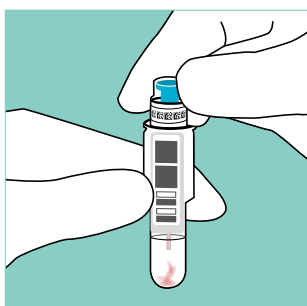

4 Sätt på reagenskorken ordentligt. Tryck inte ner den turkosa inre delen av korken. Efter att provet satts till bufferten skall analys köras inom 2 timmar.

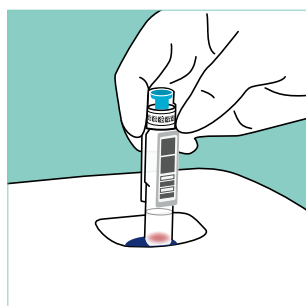


5 Välj Analysera / Analysera provet på skärmen på QuikRead go-instrumentet. Placera kyvetten i mätbrunnen. Streckkoden ska vara vänd emot dig.

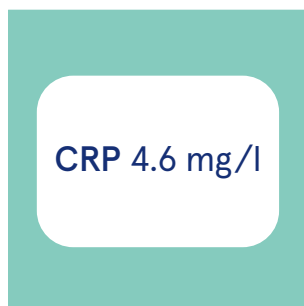

6 Analystiden är 2 minuter. Resultatet visas på skärmen och kyvetten kommer automatiskt upp ur mätbrunnen.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagen i förpackningen.

QuikRead go easy CRP

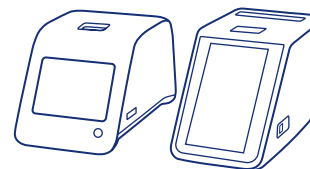

Reagenskit

Förvaring av oöppnat kit i 2–25°C: hållbart till utgångsdatum



Reagens-
korkar

Förvaring i oöppnat rör i 2–25°C: till utgångsdatum

I öppnat rör i 2–25°C: hållbarhet i 6 månader



Oöppnade
kyvetter

Förvaring i oöppnad innerförpackning i 2–25°C: till utgångsdatum

Förvaring utan innerförpackning:

2–8°C: hållbara i 6 månader / 18–25°C: hållbara i 3 månader



Öppnad
kyvett

Låt bufferten bli rumstempererad innan testet utförs

Utför testet inom två timmar efter att kyvetten öppnats

Provet är stabilt i bufferten i två timmar



Provinsamlare
(sample
collector 10 µl)

Förvaring i 2–25°C: till utgångsdatum



CRP kontroller

Oöppnad flaska i 2–8°C: hållbar till utgångsdatum

Öppnad flaska i 2–8°C: hållbar upp till 2 månader

Kontakt och beställning

Aidian Sweden AB

info@aidian.se / +46 8 623 04 00

order@aidian.se

quikread.com

Produkt	Art. nr
QuikRead go easy CRP med QuikRead go Sample Collector 10µl	153287
QuikRead go CRP Control Low	153765
QuikRead go CRP Control	153764
QuikRead go CRP Control High	153763
QuikRead go Sample Collector 10µl	153211
QuikRead go Instrument	135867
QuikRead go Plus Instrument	155375