

# Instruktion för klamydiaprovtagning hos kvinnor

## Förberedelser

- När du tar provet ska det ha gått minst en timme sedan du kissade senast.
- Använd provtagningskitet som du fått av den mottagning som beställt provet.
- Du behöver en oanvänd engångsmugg att kissa i.

## Gör så här

1. Provet ska tas på den första skvätten urin.
2. Kissa cirka 2 centimeter i muggen.




3. Skruva av locket på provröret.

**Observera! Den klara transportvätskan ska vara kvar i röret.**

4. Sug upp urin från engångsmuggen med pipetten och för över urinen i provröret, upp till mitten av fönstret.



5. Ta bomullspinnen och för in den i slidan tills det tar stopp,
6. dra tillbaka ett par cm och rotera pinnen utmed slidans vägg i minst 15 sekunder.

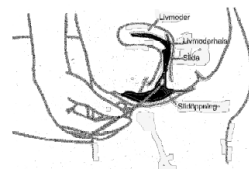

7. För ner pinnen i provröret. **Observera! Viktigt att pinnen inte kommer i kontakt med något annat.**
8. Bryt av pinnskaftet så att locket lätt kan skruvas på. Låt den avbrutna pinnen vara kvar i röret med urin.
9. Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagningen.
10. Är provröret märkt med en remissetikett, kontrollera att uppgifterna stämmer.



## Förvaring och transport

- Provet kan förvaras i rumstemperatur.
- Lämna provet till den mottagning som beställt provet eller laboratorium så fort som möjligt, senast nästa förmiddag.