

RxOnly



Den här snabbstartsguiden innehåller anvisningar för förstagångsinstallation och andra användbara instruktioner om **epoc® NXS Host** (Android™-baserad handdator, PD470SH-B). Fullständiga användaranvisningar finns i epoc System-användarhandboken med epoc NXS Host på adressen siemens-healthineers.com/document-library.

epoc NXS Host-komponenter



Tillverkas av:
Epocal Inc.
2060 Walkley Rd.
Ottawa, ON K1G 3P5 Kanada
siemens-healthineers.com/epoc

Auktoriserad representant:
Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Irland
siemens-healthineers.com/poc



Före användning

Obs! Innan du använder den här enheten ska du gå till Siemens Healthineers dokumentbibliotek ([siemens-healthineers.com/document-library](https://www.siemens-healthineers.com/document-library)) och se om det finns några uppdateringar av Host-programvaran och operativsystemet. Kontrollera att enheten kör den senaste versionen av Host-programvaran och/eller operativsystemet.

Steg 1: Ladda epoc NXS Host

Ladda batteriet enligt följande innan epoc NXS Host används för testning:



- Anslut epoc Readers strömförsörjning till eluttaget på baksidan av Reader-enheten.
- Sätt in epoc NXS Host i skåran i epoc Reader-enhetens pivå som i bilden nedan.
- Den första laddningen tar upp till fem timmar.
- När laddningen är klar håller du in **strömbrytaren** för att slå på epoc Host.

*Obs! Du **aktiverar** en epoc Host som redan är påslagen genom att hastigt trycka på **strömbrytaren**.*

*Obs! Du **avaktiverar** epoc Host genom att trycka på **strömbrytaren** på sidan av enheten.*

*Obs! Du **startar om** epoc Host genom att hålla ned **strömbrytaren** i minst 10 sekunder, varpå enheten startas om.*

Hoppa över steg 2 och 3 om inget datahanteringssystem används på platsen.


Steg 2: Ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk

Obs! Läs all information i steg 2 innan du börjar. Det kan hända att du måste kontakta din anläggnings IT-avdelning för att få de korrekta inställningarna för den trådlösa anslutningen och säkerhetsinställningarna.



- Logga in som administratör.
Kopiera eller skriv in ordet "administrator" i fälten för användarnamn och lösenord på inloggningsskärmen.
Om du vill skanna riktar du streckodsläsaren mot streckkoden och trycker på **skanningsknappen**.



Använd skärmtangentbordet om du vill skriva text.

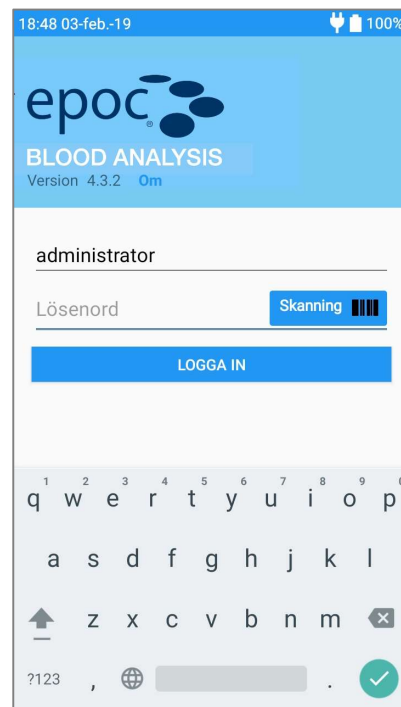



- Tryck på **Inställningar** följt av **Wi-Fi-inställningar** på startsidan.

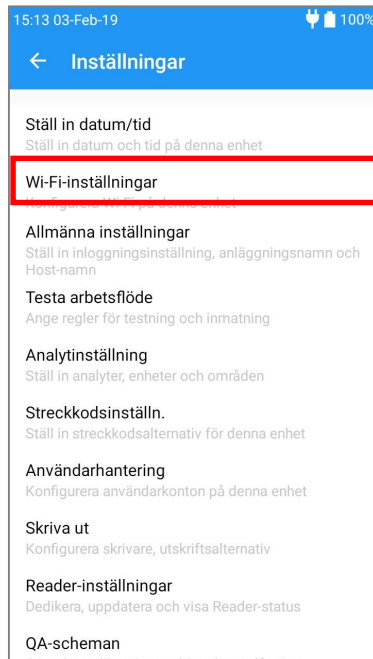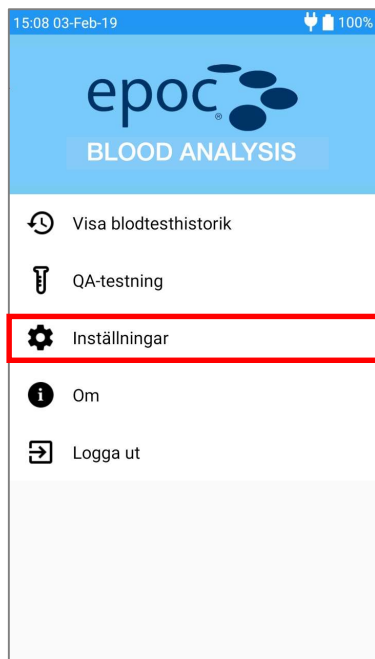

- Aktivera Wi-Fi genom att flytta växlingsknappen åt höger.





- För nätverk med SSID-utsändning:
Hitta nätverket i listan och tryck på det. Ange den nätverkssäkerhetsinformation och det lösenord som du fått av inrättningens IT-avdelning och tryck på **CONNECT (ANSLUT)**.

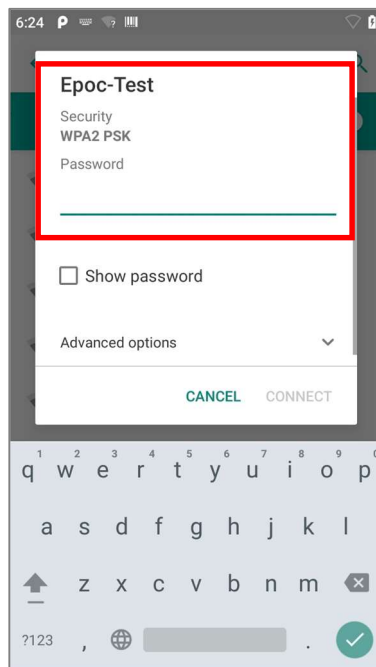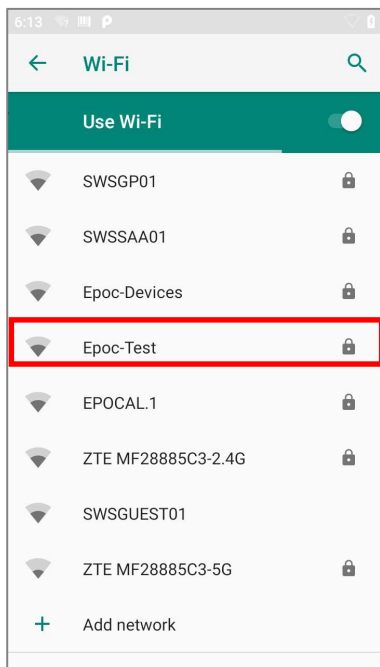

- För nätverk som INTE har SSID-utsändning:

Bläddra ned till slutet av listan och tryck på **Add network** (Lägg till nätverk). Ange den nätverkssäkerhetsinformation som du fått av inrättningens IT-avdelning och tryck på **SAVE** (SPARA).

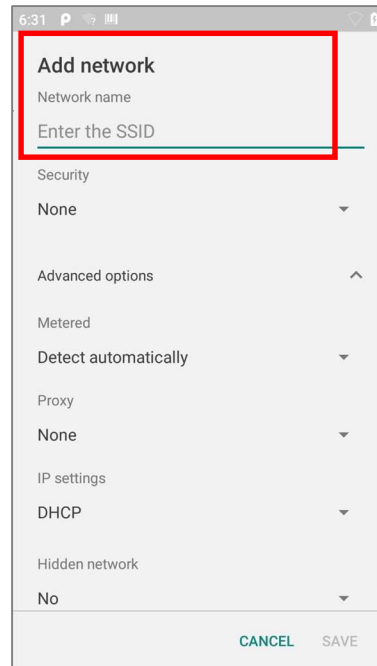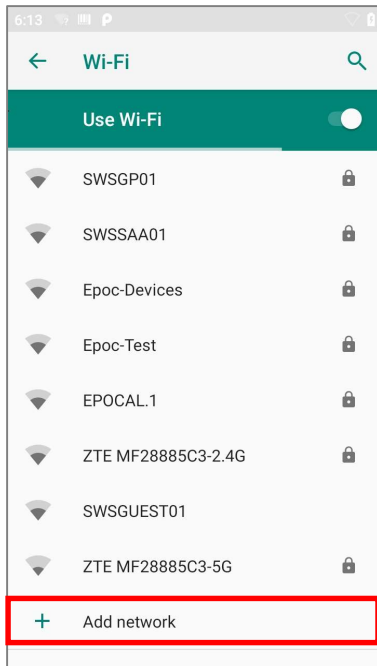

- Återgå till skärmen **Inställningar** genom att trycka på pilknappen  högst upp till vänster på skärmen.

Steg 3: Anslut till datahanteraren

1. Konfigurera datahanteringsalternativen.


- Bläddra ned till **Datahantering** på sidan **Inställningar**.





- Ställ in indikatorn på "Ja" genom att flytta växlingsknappen åt höger och ange **Adress** (IP-adress eller servernamn) och **Port** för datahanterarens serverplats.

Obs! Servernamnet och portnumret som visas är endast exempel.

Obs! **Säker synkronisering** är endast tillgänglig när TLS (Transport Layer Security) är aktiverat på datahanterarens server.

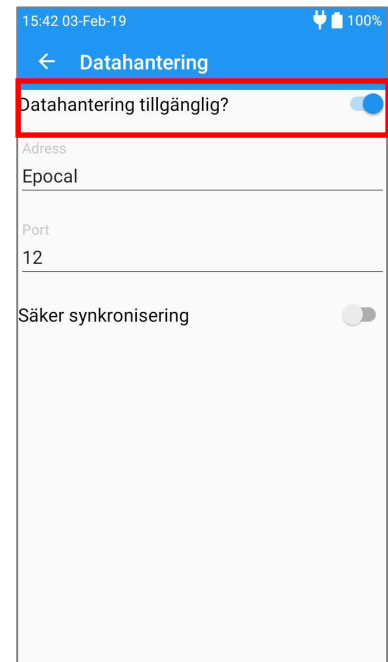


2. Gå tillbaka till startsidan och logga ut från administratörskontot.

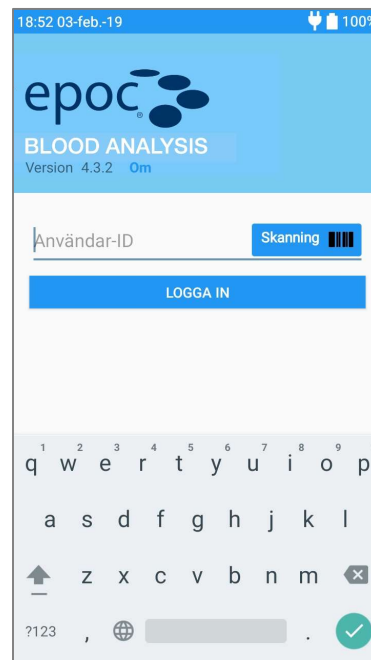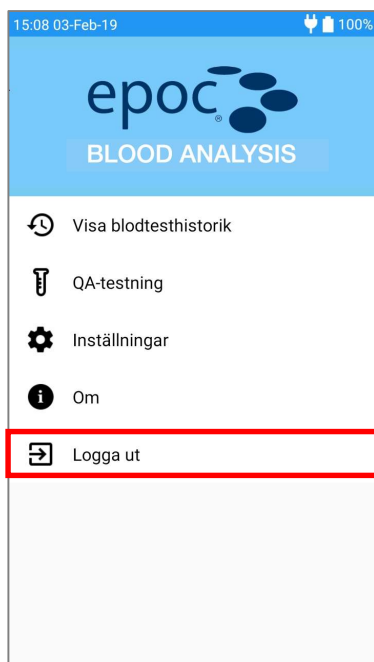

Nu är epoc NXS Host redo att användas.

Återställa epoc NXS Host

Om epoc NXS Host slutar att fungera eller svara håller du **strömbrytaren** intryckt i minst 10 sekunder, vilket gör att enheten startas om.

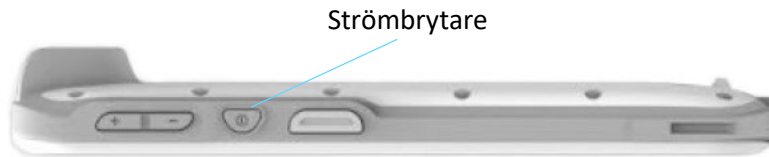

Utför aldrig en återställning under en analys. Detta avbryter testet omedelbart.

Sätta in eller byta microSD-kort i epoc NXS Host

Obs! epoc NXS Host-programvaran och -operativsystemet kan uppgraderas med ett microSD-kort. Information finns i epoc-systemhandboken med epoc NXS Host.

MicroSD-kortplatsen finns på sidan av epoc NXS Host.



- Öppna microSD-kortplatsen på sidan av Host-enheten.
- Sätt försiktigt in ett utdragsverktyg för SD-kort (eller ett gem) i det lilla hålet bredvid microSD-kortfacket. MicroSD-kortfacket trycks ut.
- Om det finns ett microSD-kort i facket tar du ut det.
- Håll Host-enheten horisontellt. Sätt försiktigt in ett nytt microSD-kort i facket och skjut in facket i kortplatsen.
- Stäng kortplatsen.



Placera Host i och ta ut den ur epoc NXS Host-hållaren

epoc NXS Host levereras med en hållare som gör det möjligt att länka Host-enheten med Reader-enheten via dockningsanslutningen på Reader-enheten. Ibland behöver du ta ut Host-enheten ur hållaren.

Ta ut epoc NXS Host ur hållaren:

- Vänd enheten så att skärmen är vänd nedåt och hållaren pekar bort från dig.
- Greppa Host-enheten med fingrarna och tryck på hållarens frigöringsknapp med båda tummarna tills hållaren lossnar från enheten.



Du sätter in Host-enheten i hållaren genom att trycka ihop dem tills du hör ett klick.

Obs! Hållaren och Host-enheten måste sitta ihop ordentligt så att laddningskontaktarna ansluts.

Revisionshistorik	Rev. 03 uppdaterade kontakt- och revisionsuppgifter, ersatte symboler
-------------------	---